

Steritest™ EZ 無菌試験用ユニット 総合カタログ



ステリテストEZ 無菌試験用ユニット

ステリテストEZユニットは毒性および発熱性物質試験に合格した滅菌済み製品です。個別にブリストア包装され、ステリテストエキノクスポンジに素早く装着できます。

キャニスターの材質およびサンプリング針の形状は、医薬品の剤型に応じて様々な種類があります。



厳正な品質管理プログラム

ステリテストEZ ユニットの各製造ロットでは次の試験を実施：

- 微生物発育能および捕捉性能試験
- ETO 滅菌ユニットの残留エチレンオキシドガス濃度
- 無菌性および滅菌サイクル
- 毒性および発熱性物質試験（監査ベースで実施）
- メンブレンのバブルポイントおよび流量
- 外観目視検査
- 最大破裂圧

ステリテストEZユニットの各箱には、ロット毎の品質保証書が入っています。


抗菌活性を有さない製剤用 ステリテストEZ ユニット

- メンブランフィルターの材質：セルロース混合エステル
- 微生物発育阻止物質（抗生物質等）を含まない試料に有用
- 1箱に10個入り

アンプルに充填された液剤

ステリテストEZ ユニット


カタログ番号 TZHALA210

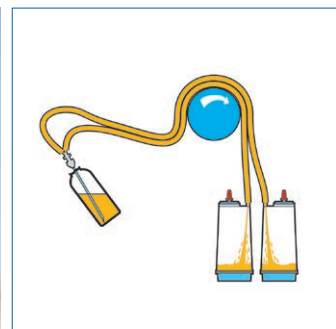

ガラス製ボトルに充填されたLVP

ステリテストEZ ユニット



カタログ番号 TZHALV210

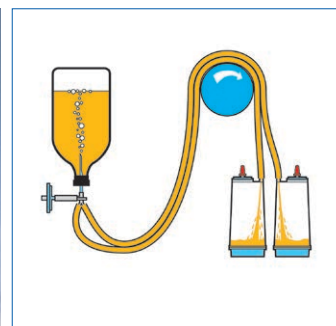

プラスチックバッグに充填された液剤

ステリテストEZ ユニット


カタログ番号 TZHALA210

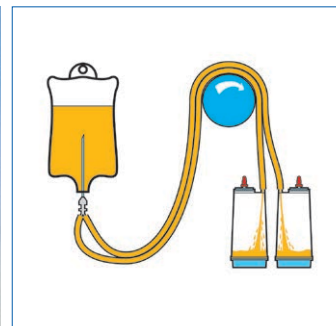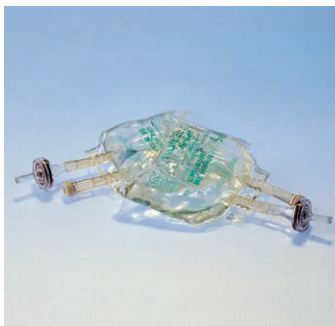

バイアルに充填されたSVP

ステリテストEZ ユニット


カタログ番号 TZHASV210

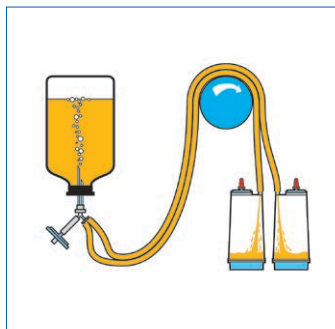

プラスチック容器に充填された液剤

ステリテストEZ ユニット


カタログ番号 TZHAPC210

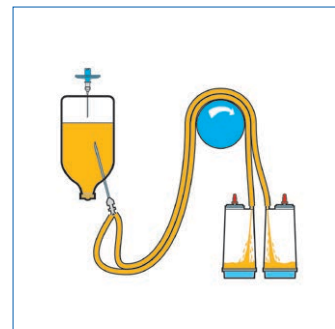

医療機器

ステリテストEZ ユニット


カタログ番号 TZHAMD210

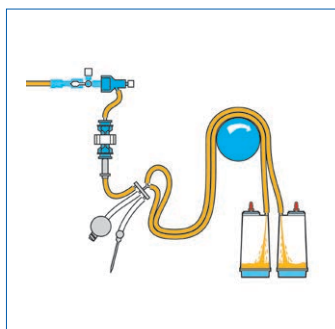

アンプルに充填された可溶性粉末

ステリソリューテストEZ ユニット


カタログ番号 TZHADA210

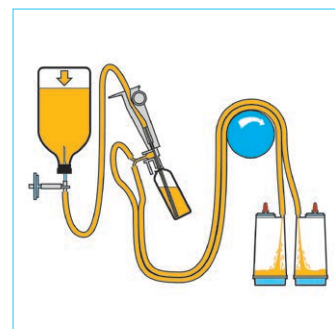

プレフィルドシリンジ

ステリテストEZ ユニット


カタログ番号 TZHASY210

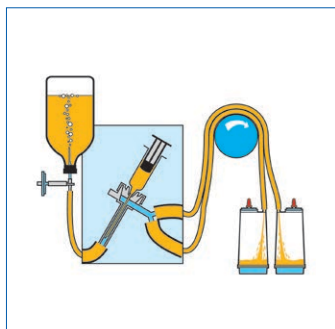

バイアルに充填された可溶性粉末

ステリソリューテストEZ ユニット

カタログ番号 TZHADV210

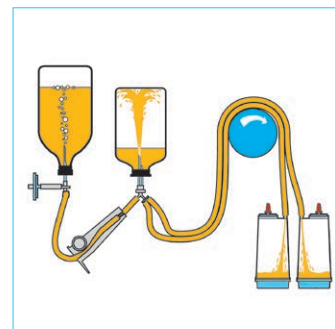


抗生物質製剤および抗菌剤含有製剤用ステリテストEZ ユニット

- メンブランフィルターの材質：ポリビニリデンフロライド
- キャニスターは抗生物質の洗浄・除去が効果的にできるように設計
- 1箱に10個入り

可溶性粉剤および高力価抗生物質

ステリテストEZ ユニット

カタログ番号 TZHVAB210

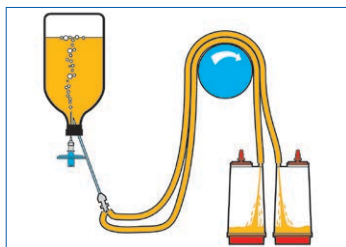


ステリダイリ्यूーターユニット

カタログ番号 TZVC00010

TZV000010

(ベントフィルター無し)

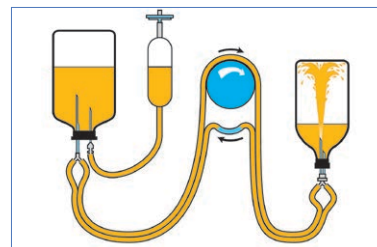


液状抗生物質

ステリテストEZ ユニット

カタログ番号 TZHVS210


TZHVL210

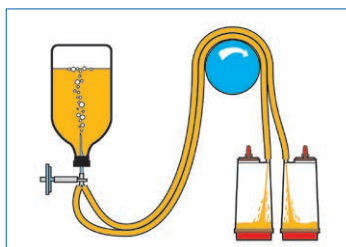

バイアルに充填された可溶性粉末

ステリソリューテストEZ ユニット

カタログ番号 TZHVDV210

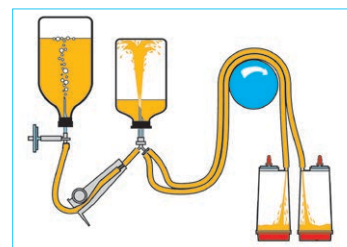


溶剤、クリーム、軟膏、動物用注射剤用ステリテストEZ ユニット

- メンブランフィルターの材質：ポリビニリデンフロライド
- 補強されたフィルターベース構造による優れた耐圧性
- 特殊ポリマー（ナイロン）製のキャニスターによる優れた溶剤耐性
- バイアルやアンプルに充填された製品用のシングルサンプリング針（ベント針付属）
- 1箱に10個入り

溶剤、クリーム、軟膏、動物用注射剤—

ステリテストEZ ユニット

カタログ番号 TZHVS210

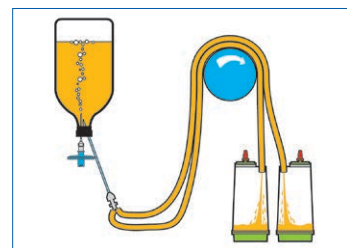

ご注文情報

■ ステリテストEZユニット用アクセサリ



製品名	液体移送キット
入数/箱	10
カタログ番号	TEA000010



製品名	無菌ベント針
入数/箱	25
カタログ番号	TEFG02525

本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Merck KGaA の登録商標もしくは商標です。Merck Millipore and the M mark are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.

メルク株式会社

メルクミリポア事業本部 バイオモニタリング事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.jp

お問合せ▶On-Line:www.merckmillipore.jp/jpts Tel: 0120-013-326 Fax: 03-5434-4897